

Hi-MAX

4.2Fr

心臓血管造影用カテーテル




シンウォール構造によるハイフロー性と、 2層構造を採用、*Hi-MAX*は ワンランク上の機能性を提案します。

2層構造とステンレスメッシュ採用

インナーチューブにはフッ素系の素材を採用し、カテーテル内部を通過させるガイドワイヤーなどとの摩擦抵抗を、低減させます。

アウターチューブは、ナイロン系の素材の中にステンレスメッシュを編込み、プッシュアビリティ・トルク伝達性に優れたシャフトになっています。

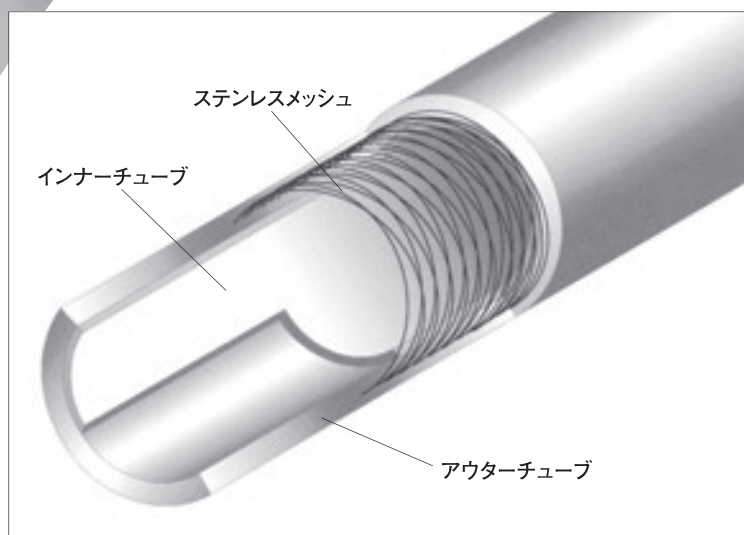


安全性の高い先端ソフト構造

カテーテル先端部分はソフトチップと柔軟な素材のチューブを組み合わせる事により、安全性を高めています。

左冠状動脈造影用

JLジャドキンス

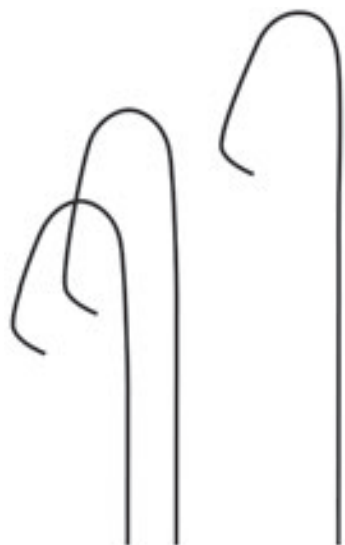

JL-35 JL-50 JL-40

右冠状動脈造影用


JRジャドキンス



JR-50 JR-35 JR-40

左冠状動脈造影用


ALアンブラッツ

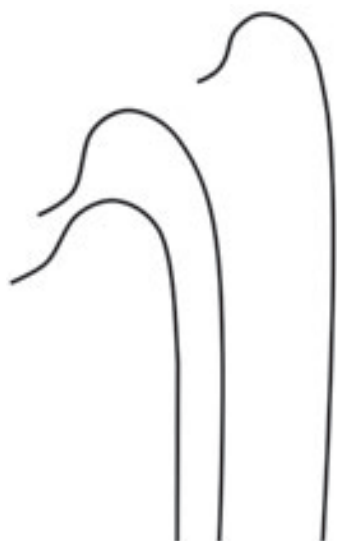

AL-2 AL-3 AL-1


右冠状動脈造影用

ARアンブラッツ

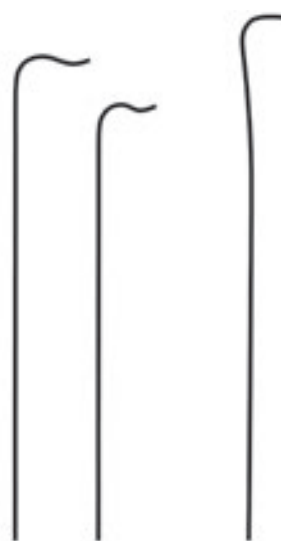


AR-3 AR-2 AR-1

左右冠状動脈造影用	
<i>MITSUDO</i>	<i>LRB</i>

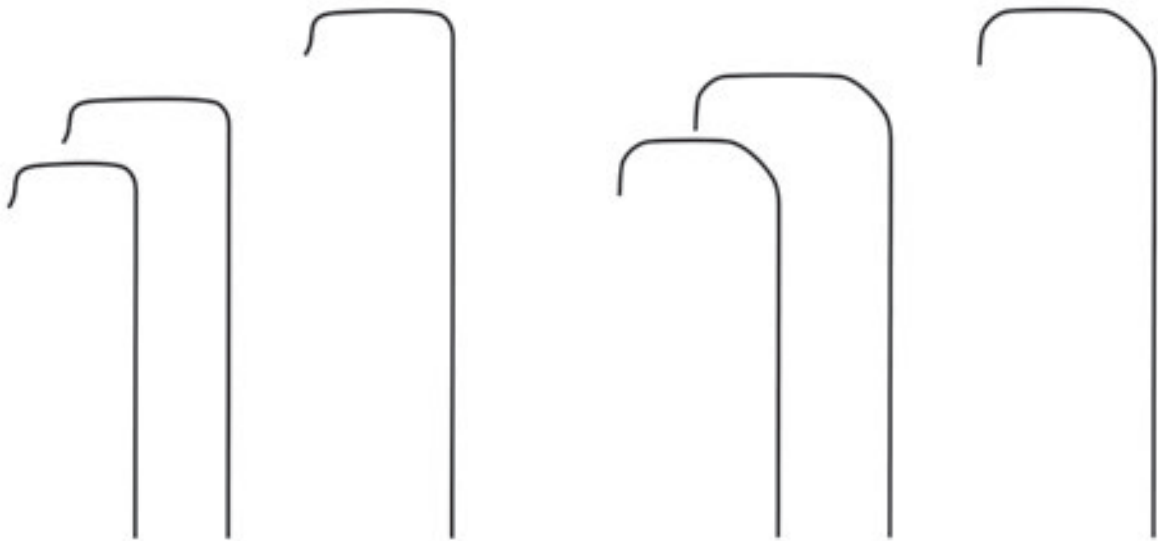

MITSUDO-K35	MITSUDO-K45	MITSUDO-K40	LRB-35	LRB-45	LRB-40
-------------	-------------	-------------	--------	--------	--------

左心室造影用	バイパス造影用	内胸動脈造影用
<i>ビッグテール</i>	<i>LCB/RCB</i>	<i>IMA</i>

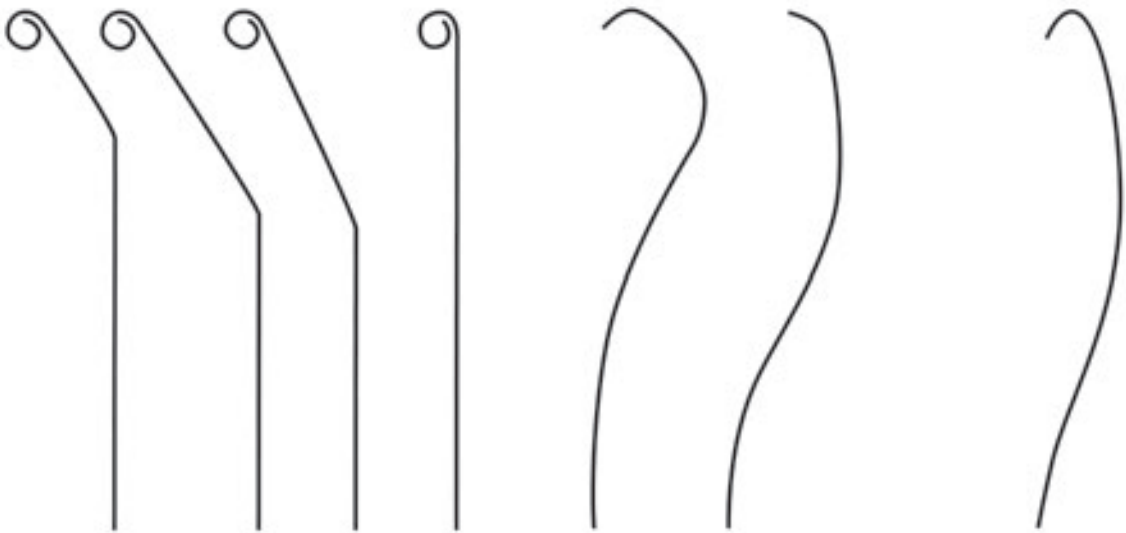


アングル	ストレート	LCB	RCB	IMA
アングル145°	アングル155°			

内径アップを可能にした シンウォール構造

広い内径のシンウォール構造で、ハイフローを実現。確実な造影をサポートします。

(従来品、0.035"ガイドワイヤー適合の当社カテーテルとの比較)

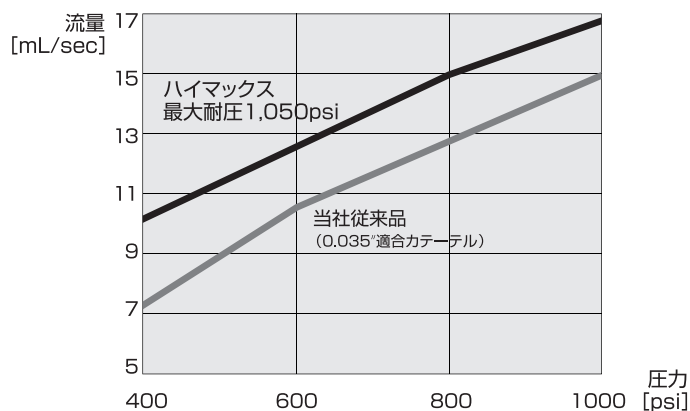

ビッグテール型/110cmをイオバミロン370 (37℃加温・9.1cP) 相当の粘度液で測定

優れた
高流量特性・高耐圧

	製品番号	名称	規格			
			径	全長	サイドホール数	適合ワイヤー
左冠状動脈造影用 JL・AL	JL-35-NC4.2 JL-40-NC4.2 JL-45-NC4.2	JL-35 JL-40 JL-45	4.2Fr	100cm	－	0.038inch
	AL-1-NC4.2 AL-2-NC4.2 AL-3-NC4.2	AL-1 AL-2 AL-3				
右冠状動脈造影用 JR・AR	JR-35-NC4.2 JR-40-NC4.2 JR-50-NC4.2	JR-35 JR-40 JR-50	4.2Fr	100cm	－	0.038inch
	AR-1-NC4.2 AR-2-NC4.2 AR-3-NC4.2	AR-1 AR-2 AR-3				
左右冠状動脈造影用 MITSUDO	MITSUDO-K35-NA4.2 MITSUDO-K40-NA4.2 MITSUDO-K45-NA4.2	MITSUDO-K35 MITSUDO-K40 MITSUDO-K45	4.2Fr	80cm	1	0.038inch
	MITSUDO-K35-NC4.2 MITSUDO-K40-NC4.2 MITSUDO-K45-NC4.2	MITSUDO-K35 MITSUDO-K40 MITSUDO-K45	4.2Fr	100cm	1	0.038inch
左右冠状動脈造影用 LRB	LRB-35-NC4.2 LRB-40-NC4.2 LRB-45-NC4.2	LRB-35 LRB-40 LRB-45	4.2Fr	100cm	1	0.038inch
左心室造影用 ピグテール	PT-A-ND4.2 PT-145-ND4.2 PT-155-ND4.2 PT-S-ND4.2	アングル アングル145° アングル155° ストレート	4.2Fr	110cm	10	0.038inch
バイパス造影用 LCB・RCB	LCB-NC4.2 RCB-NC4.2	LCB RCB	4.2Fr	100cm	－	0.038inch
内胸動脈造影用 IMA	IMA-NC4.2	IMA	4.2Fr	100cm	－	0.038inch

使いやすいカテーテルは安全性を向上します。

術者の意図する操作にナチュラルに反応するHi-MAXは、形状・長さなどのカスタマイズが可能です。
担当営業にご相談下さい。

もうひとつの柔らかさHi-MAX。

Hi-MAXはしなやかさが特徴のカテーテルです。手技のスタイルに応じたカテーテルの選択が可能です。

JL-40-NC4.2 通常タイプ

↓
JL-40-SNC4.2 ソフトタイプ

ハナコ・エクセレントENカテーテル
医療機器承認番号：20100BZZ01855000

製造販売元



医療の先端をめざす

ハナコメディカル株式会社
Hanacomedical CO.,LTD.

本社 〒330-0073 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目24番11号
TEL 048-881-4101(代) FAX 048-881-5875
大阪営業所 〒564-0002 大阪府吹田市岸部中2丁目2番13号
TEL 06-6330-7707(代) FAX 06-6330-7088
URL: <http://www.hanacomedical.co.jp/>
E-mail: eigyou@hanacomedical.co.jp